

メーカー希望小売価格

JW-II 本体




TAIS コード 00233-000003
■ A・B タイプ 駆動輪×2 専用充電器×1 バッテリー×1
 車体取付けブラケット×2
 ●メーカー希望小売価格 …………… **¥313,950** (税抜価格 ¥299,000)



TAIS コード 00233-000004
■ C タイプ (22 インチ専用) 駆動輪×2 専用充電器×1 バッテリー×1
 車体取付けブラケット×2 介助用ハンドブレーキ×1
 ●メーカー希望小売価格 …………… **¥334,950** (税抜価格 ¥319,000)

お取付け可能な車イス

1. リクライニング、モジュール形式でないこと。
2. 駆動輪が 22, 24 インチのもの。
 ※ C タイプは、22 インチのみ。

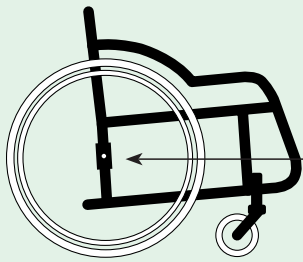

**3. 車軸がフレームの
バックパイプに取付け
られる形式のもの**

●くわしくは、JW-II 取り扱い店もしくは、右記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。

■メーカー希望小売価格には、消費税が含まれております。■本仕様は予告なく変更することがあります。■仕様変更などにより写真や内容が一部実物と異なる場合があります。■ボディカラーは印刷のため実物と異なって見える場合があります。

走行上の注意

●この製品の装着車イスは、電動車イスとなります。それ以外の用途には使用しないでください。●取扱説明書をよく読んで、交通マナーを守りましょう。●運転に慣れるまで、広い安全な場所で充分練習してください。●この製品の装着車イスは、道路交通法上、身体障害者用車イスであり歩行者として扱われます。歩行者としての交通ルールやマナーを守ってください。●走行中は、携帯電話やトランシーバーを絶対に使用しないでください。使用する場合は、安全な場所に車イスを止め、車イスの電源スイッチを切ってください。また、高圧線やテレビ塔など強い電磁波が出ている所での走行は避けてください。●次のような条件下または場所では、走行を避けるか介助者の助けを借りましょう。(交通量の多い道路・道幅の広い横断歩道・踏切・路肩付近・急な坂道・狭い道・砂利道・夜間・雨天時・ぬかるみ・雪道や凍結路・濃霧・強風時) ●乗越し可能な段差や溝幅、制限重量は、装着車イスによって異なります。(標準タイプの場合、可能な段差は 2 ～ 4cm、制限重量は 75kg です。) ●安全に使っていただくため、この製品には“危険”、“警告”、“注意”の安全表示ラベルを貼付しています。必ず守ってください。

インターネットホームページ <http://www.yamaha-motor.jp/wheelchair/>

2012 年 7 月現在

— JW-II についての詳しいお問い合わせは —

JW-II 用品

バッテリー残量表示付 (5 段階ランプ方式)



■専用バッテリー

軽量 (2.9kg) ・コンパクト設計のニッケル水素バッテリー。
 フルに充電して 15km 以上の連続走行が可能です。

●メーカー希望小売価格 …………… **¥56,700**
 (税抜価格 ¥54,000)

リフレッシュ充電機能付 (バッテリー保護仕様)



■専用充電器

家庭用電源で充電できる専用充電器。充電時間は急速
 充電 2 ～ 3 時間。リフレッシュ充電 3 ～ 13 時間。

●メーカー希望小売価格 …………… **¥26,250**
 (税抜価格 ¥25,000)

仕様諸元

品 名		A・B タイプ	C タイプ
駆動方式		後輪直接駆動	
操舵方式		左右ハンドリム操舵	片手ハンドリムの片足操舵
制動方式		制動力アシスト+手動車イスブレーキ	
駆動車輪径		22,24 インチより選択	22 インチのみ
車輪取付方法		着脱式／固定式	固定式
手動／電動切替		手元スイッチ切替え式	
モーター		30 分定格出力 24V 90W×2	
介助ブレーキ		—	レバー操作/後輪キャリバー式・サイドブル形
バッテリー (1 個あたり)		ニッケル水素 (JW 専用) 24V×6.7Ah 重量 2.9kg	
充電器	電源	AC100V ～ 240V 50 / 60Hz	
	充電方式	完全自動充電方式	
	充電時間	2.5 ～ 3 時間 (常温 25℃) ※1	
航続距離		15km 以上 / 1 充電 (A・B タイプ) ※2	
補助速度範囲		前後進 6km / h 未満	前後進 4km / h 未満
ユニット重量		13kg (バッテリー含まず)	14.4kg (バッテリー含まず)

※1 バッテリー残量警告灯点灯から満充電まで。時間は目安であり、気温や電源の状態により充電時間が異なる場合があります。
 ※2 22 インチ仕様、バッテリー満充電、常温 25℃、平坦路 5km/h 連続走行時

JW-II タイプ別バリエーション

車輪タイプ	タイ ヤ サ イ ズ	
	22 インチ (22×1 ³ / ₈)	24 インチ (24×1 ³ / ₈)
JW-II		
A タイプ	着脱式／固定式	着脱式／固定式
B タイプ		
C タイプ		

選択の目安

- A タイプ / 両手操作でハンドリムを握れる方
- B タイプ / 両手操作でハンドリムを握れない方
- C タイプ / 片手、片足で操作される方

ヤマハ発動機 JWビジネス部	お気軽にお問い合わせください。 0120-808208 料 金 無 料	受付時間 9:00～17:30 (土曜、日曜、弊社所定の 休日等を除く)
※福祉業界関係者の方は、こちらをお願いします。 TEL.053-460-6167		

車イス用電動補助ユニット

JW-II



自分でできる「喜び」と積極的に行動する「意欲」を“後押し”します。

10月1日は「福祉用具の日」



ヤマハ発動機株式会社
 JWビジネス部
 〒435-0054 静岡県浜松市中区早出町882



2012年7月

介護保険対象品・補装具対象品

もっと自由な生活を実現するために…。
ヤマハの先進技術〈パワーアシストシステム〉が
さらに進化しました。



外食も気軽に楽しめます。



日常の買い物もこれまでより気軽に。



オフィスでの仕事がより活動的に。

今までの車イスと同じ操作であなたの行動をさりげなくサポート。
安全性・操作性を一段と向上。
高性能になったバッテリーが長時間のお出かけにゆとりをつくれます。



軽量コンパクト、装着したまま折り畳みも可能。



片手の操作のみでも〈パワーアシストシステム〉がしっかりサポート。ためらわずに外出を楽しむことができます。




驚きの軽さ、スムーズな動き。

JW-II は、人にやさしい高機能を追求しました。

やさしさ機能
1

現在ご使用の車イスに
簡単に装着できます。

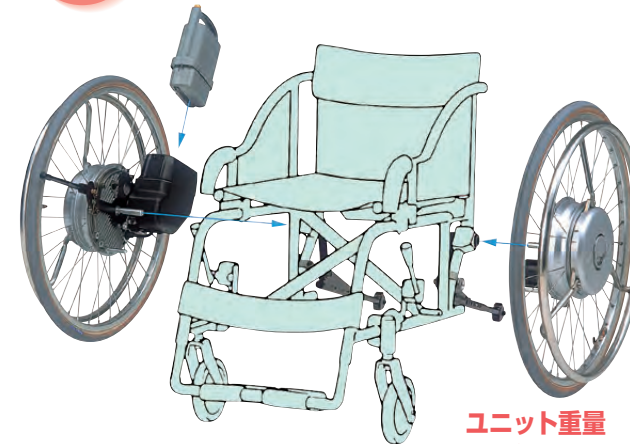

ユニット重量
わずか 15.9kg

やさしさ機能
2

より高機能・高性能に
なった専用バッテリー



ニッケル水素バッテリーの採用により、フル充電時の航続距離は今までの約2倍の15km。また、新機能のバッテリー残量表示で更に安心。

・5段階の表示ランプによる残量表示

やさしさ機能
3

充電器もより使いやすく



バッテリーの状態を知らせ、最適な充電を促す専用充電器。世界各国での使用も可能。(別途、各国形状にあったプラグアダプターが必要です。)

・持ち運びに便利なグリップ付

やさしさ機能
4

下り坂でも安心

より微妙にコントロールされた補助力により、下り坂での制動走行(車のエンジンブレーキ相当)を実現。加速を防止してとても安心。

やさしさ機能
5

操作性もさらに向上



時速6km/h以上になると補助力が滑らかに低減し、通常の手動状態と同じ感覚で走行できます。また、新機能のスイッチボタンは、押すだけでより簡単に補助力のオン・オフが可能。

手動車イスの操作能力によって、3つのタイプから選べます。

両手で操作が可能な方

● ハンドリムを握れる人

A タイプ

十分な握力をお持ちで、手動車イスでの遠距離移動や坂道などで苦勞されている方にお勧めします。(例：せき損の方)

補助動力は手動操作の力がある程度大きくなると働きます。



● ハンドリムを握れない人

B タイプ

握力が弱く、ハンドリムによる手動車イス走行が大変な方にお勧めします。(例：けい損の方)

補助動力は手動操作の力が小さくても働きます。



片手、片足で操作される方

● 右マヒ、左マヒのいずれの方

C タイプ

脳血管障害等のため、両手で車イスを操作できない方にお勧めします。(例：片マヒの方)

片手で直進が可能。操舵方向転換は、健側の足で行います。

